

Ficha técnica

Filtro Opcional de Veia Cava com gancho

- Prevenção permanente e/ou temporária de embolia pulmonar
- 4 abordagens: Jugular, Braquial, Femoral e Poplítea.
- Condicionada para Ressonância Magnética de 3T
- Aprovado pela ANVISA

O kit do Filtro Opcional de Veia Cava ALN com Gancho contém:

- ✓ Um **Filtro de Veia Cava ALN com Gancho** em seu **suporte**
- ✓ Um **sistema de introdução** (dilatador, bainha introdutora e cateter de avanço)

1. Nível de ancoragem / Nível superior

É composto por 6 hastes. Suas extremidades distais são curvas em forma de gancho, o que permite uma ancoragem eficiente.

9 diferentes comprimentos de hastes

→ Diminuindo o risco de entrelaçamento

2. Nível de centralização / Inferior composto por 3 hastes

- ✓ 2 hastes
 - ⇒ *Projetadas para minimizar o risco de trauma na parede*
- ✓ 1 haste com uma alca que permite empurrar o filtro durante a implantação por via femoral ou poplítea.

Ápice com gancho

As hastes são fixadas dentro do ápice. Este filtro pode ser recuperado utilizando o Kit ALN "2 em 1" de Extração e/ou Reposicionamento, e o gancho permite que ele seja recuperado usando um laço*.

Hastes de Ancoragem (6)
Gancho na extremidade.

Centralização de haste (1)

Laço na ponta (usado para empurrar o filtro durante a implantação pela abordagem femoral ou poplítea)

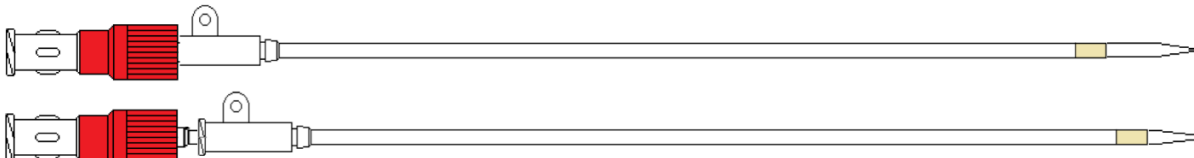
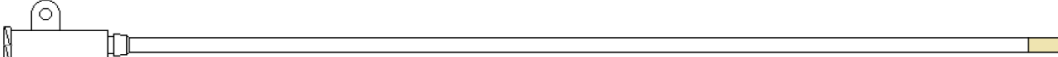
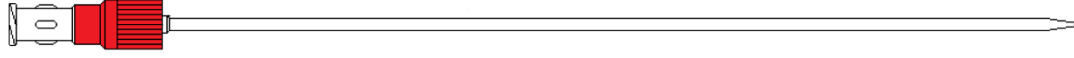
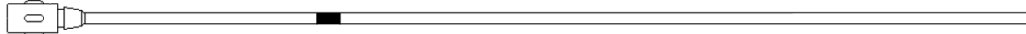
Parametria do filtro com gancho

Diâmetro das hastes (mm)	Material	Diâmetro máximo da veia Cava (mm)	Comprimento do Gancho (mm)	Comprimento do Filtro (mm)
0.3	Aço inoxidável 316 LVM**	32	4	59

* O Laço para remoção de um filtro opcional de veia cava ALN deve ter um diâmetro máximo do fio de 0,6 mm. A bainha de retirada usada com o laço deve ter um diâmetro interno mínimo de 9F.

**ISO 5832-1

Kit de implantação do filtro de Veia Cava ALN com Gancho

Abordagem	Jugular	Femoral	Braquial	Poplítea	
Código do Produto	FJ.HOOK23	FF.HOOK23	FB.HOOK23	FP.HOOK23	
Suporte do filtro	 Sistema de avanço	 Sistema de avanço	 Sistema de avanço	 Sistema de avanço	
Bainha introdutora e suporte do filtro	 Parafuso com sistema Luer lock: Fixação perfeita	 Parafuso com sistema Luer lock: Fixação perfeita	 Parafuso com sistema Luer lock: Fixação perfeita	 Parafuso com sistema Luer lock: Fixação perfeita	
Sistema de introdução: Dilatador na bainha introdutora. 					
Bainha Introdutora	 Faixa marcadora radiopata Sem válvula hemostática				Ø Interno : 7F Ø Externo : 9F
	Comprimento: 600 mm	Comprimento: 600 mm	Comprimento: 1200 mm	Comprimento: 1200 mm	
Dilatador	 Ø Interno : 3F				Ø Externo : 7F
	Comprimento: 660 mm	Comprimento: 660 mm	Comprimento: 1260 mm	Comprimento: 1260 mm	
Cateter de Avanço	 Marca negra				Ø Externo : 7F
	Comprimento: 614 mm	Comprimento: 614 mm	Comprimento: 1214 mm	Comprimento: 1214 mm	

Esterilização por óxido de etileno