

Ficha Técnica

Filtro de Vena Cava Opcional ALN con Gancho

- Prevención permanente y/o temporal contra el embolismo pulmonar
- 4 accesos: yugular, braquial, femoral and poplítea
- 3T MRI Condicional
- CE Mark 0297
- Aprobado por la FDA

El kit del Filtro de Vena Cava ALN Opcional con Gancho se compone de:

- ✓ El Filtro de Vena Cava ALN Opcional con Gancho colocado en su soporte
- ✓ Un sistema de introducción (catéter dilatador, catéter de introducción, y catéter empujador)
- ✓ Una aguja de punción
- ✓ Un Guía en J

Ápice con Gancho

Las puntales están engarzadas dentro del ápice.
Este filtro se puede recuperar utilizando uno de los kits de extracción y/o reposicionamiento ALN, y el gancho permite recuperar el filtro utilizando un lazo *.

1. Nivel de anclaje/Nivel superior se compone de 6 puntales cortos. Su punta distal está curvada en forma de gancho permitiendo un anclaje activo.

9 puntales con diferentes longitudes
→ Para minimizar el entrelazado durante la entrega

Puntales para Centrado (2)

- 2. Nivel de centrado/Nivel inferior** se compone de 3 puntales largos cóncavos:
- ✓ 2 puntales:
⇒ Destinado a reducir el riesgo traumático en la pared de la vena.
 - ✓ 1 puntal con un círculo que permite empujar el filtro durante la implantación por acceso

Puntal para Centrado (1)

Punta circular (usada para empujar el filtro en una implantación por acceso femoral o poplítea)

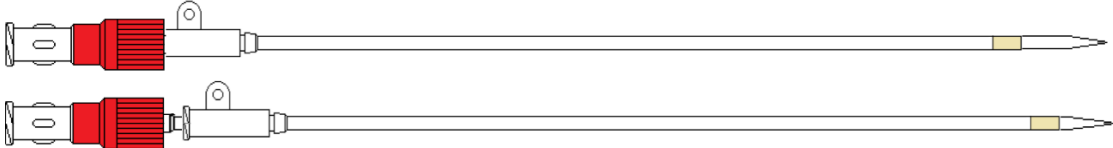
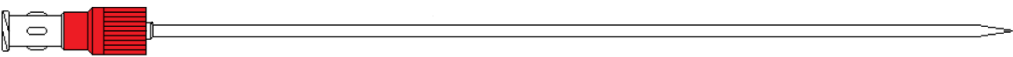
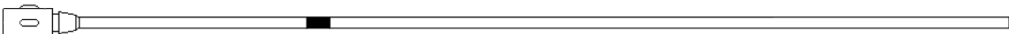
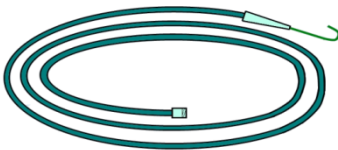
Características del Filtro con Gancho

Diámetro de los puntales (mm)	Material	Diámetro Máximo de la Vena Cava (mm)	Longitud del Gancho (mm)	Longitud del Filtro con Gancho (mm)
0.3	Acero inoxidable 316 LVM**	32	4	59

* El lazo para retirar un filtro de vena cava ALN debe tener un diámetro máximo de 0,6mm. El catéter de extracción utilizado con el lazo debe tener un diámetro interno mínimo de 9F.

**ISO 5832-1

Kit de implantación del Filtro de Vena Cava ALN Opcional con Gancho

Accesos	Yugular	Femoral	Braquial	Poplítea
Código de Producto	FJ.HOOK	FF.HOOK	FB.HOOK	FP.HOOK
Soporte del Filtro	 Sistema de empuje	 Sistema de empuje	 Sistema de empuje	 Sistema de empuje
Catéter Introdutor y Soporte	 Enrosca con un sistema Luer-Lock: Unión perfecta	 Enrosca con un sistema Luer-Lock: Unión perfecta	 Enrosca con un sistema Luer-Lock: Unión perfecta	 Enrosca con un sistema Luer-Lock: Unión perfecta
Sistema de introducción: Dilatador en el Catéter de introducción 				
Catéter Introdutor	 Marcador radiopaco Sin válvula hemostática Ø Interno : 7F Ø Externo : 9F			
	Longitud: 600 mm	Longitud: 600 mm	Longitud: 1200 mm	Longitud: 1200 mm
Dilatador	 Ø Interno : 3F Ø Externo : 7F			
	Longitud: 660 mm	Longitud: 660 mm	Longitud: 1260 mm	Longitud: 1260 mm
Catéter empujador	 Marca negra Ø Externo : 7F			
	Longitud: 614 mm	Longitud: 614 mm	Longitud: 1214 mm	Longitud: 1214 mm
Aguja de punción	 Ø : 18 G			
Guía en J	Ø: 0.035" J Radio (mm) : 3 Longitud : 150 cm (FJ.HOOK, FF.HOOK) 180 cm (FB.HOOK, FP.HOOK) 			

Esterilización por óxido etileno