



**NÁVOD K POUŽITÍ
KAVÁLNÍ FILTR ALN OATF S HÁČKEM
ZAVÁDĚNÝ
CESTOU V. POPLITEA
(CS)**



Rok CE označení: 2020

Ref. č. produktu: FPH.OATF19

Edice 03/2026

Obsah

1: Obecné informace.....	4
2: Symboly	5
3: Obsah sady	6
4: Indikace	7
5: Kontraindikace	8
6: Složení.....	8
7: Upozornění.....	9
8: Komplikace	11
9: Postup zavedení	13
10: Sledování pacienta.....	19
11: MRI.....	19
12: Vyjmutí.....	20
13: Obal a manipulace.....	20
14: Likvidace zařízení	21
15: Záruka.....	21
16: Povinnost hlásit události nebo rizika událostí	21

1: Obecné informace

Kavální filtr ALN OATF s háčkem je odstranitelný filtr (trvalý a/nebo dočasný). Jeho určeným účelem je poskytnout účinnou ochranu proti plicní embolii.

Kavální filtr ALN OATF je tvořen dvanácti nožičkami z nerezové oceli 316 LVM. Šest nožiček má háčky pro uchycení v duté žíle, tři nožičky umožňují vycentrování filtru v duté žíle a další tři nožičky proti naklonění optimalizují vystředění filtru v duté žíle.

Tento kavální filtr ALN OATF s háčkem je určen k implantování pacientům s průměrem duté žíly menším nebo rovnajícím se **32 mm**.

Před použitím si pozorně přečtěte návod. Tímto návodem je možné se řídit pouze v případě, že jste se rozhodli pro zavedení cestou **v. poplitea**. Nepoužívejte pro zavádění jinou přístupovou cestou (v. brachialis, v. jugularis nebo v. femoralis).

Kavální filtr ALN OATF s háčkem je dodáván sterilní. Je určen pro jedno použití.

2: Symboly

Tato kapitola obsahuje definici symbolů používaných k označení výrobku a uvedených na obalu.

	Katalogové číslo
	Číslo šarže
	Sériové číslo
	Použitelné do
	Datum výroby
	Upozornění
	Viz návod k použití
	Sterilizováno pomocí ethylenoxidu, dvojitý sterilní bariérový systém
	Nepoužívejte opakovaně
	Znovu nesterilizujte
	Pokud je obal poškozený, přípravek nepoužívejte
	Uchovávejte v suchu
	Chraňte před slunečním zářením
	Podmíněně MRI kompatibilní
	Nepyrogeenní
	Zdravotnickým prostředkem
	Jedinečným identifikátorem prostředku
	Výrobcem


3: Obsah sady

Před samotným zaváděním zkontrolujte, zda sada obsahuje veškeré potřebné díly. Pokud nějaký díl chybí, použijte jinou sadu.

Kavální filtr ALN OATF s háčkem zaváděný cestou v. poplitea obsahuje tyto díly:

- Filtr o výšce 6 cm (1) umístěný v držáku filtru (2).
- Držák filtru se skládá z kuželové trubice, z ochranné zátky, spony a pístu (3). Píst tlačí filtr do zaváděcího katétru pomocí kovové trubice.
- Zaváděcí systém, jehož součástí je dilatátor o délce 1 260 mm (4) (červený konektor Luer Lock) našroubovaný v zaváděcím katéttru 7F o délce 1 200 mm (5).
- Tlačný katétr o délce 1 214 mm (6). Tento díl umožňuje posouvání filtru v zaváděcím katéttru.
- Punkční jehlu o průměru 18G a délce 70 mm (7).
- Vodicí drát s „J“ zakončením potažený teflonem o průměru 0,035" a délce 1 800 mm (8).

Sada kaválního filtru ALN OATF s háčkem zaváděného cestou v. poplitea je dodávána sterilní a jedná se o prostředek pro jedno použití. Sterilizace se provádí ethylenoxidem.

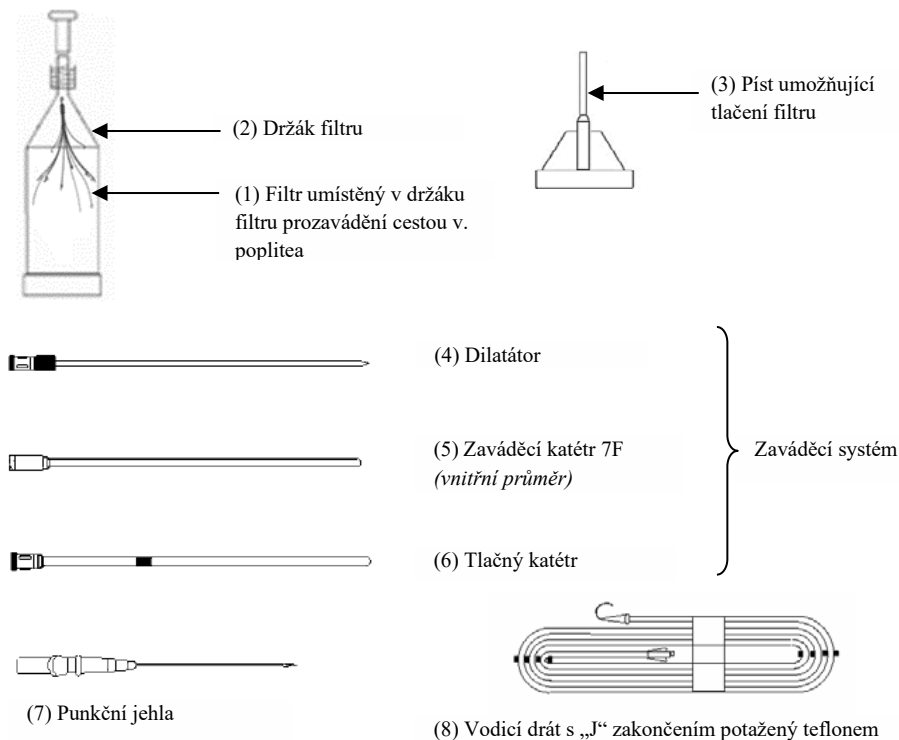

4: Indikace

Kavální filtr ALN OATF s háčkem může být zaveden pouze v případech indikací uvedených v této kapitole. Níže uvedené indikace jsou uznány společností SFICV¹. Jsou založeny na konsenzech společnosti SIR² a CIRSE³.

Uznávané indikace:

Hluboká žilní trombóza (v. poplitea, v. femoralis, v. iliaca nebo dutá žíla) s plicní embolií nebo bez ní u pacientů vykazujících jednu nebo několik z následujících charakteristik:

- Komplikace antikoagulační léčby vedoucí k přerušení terapie,
- Symptomatická recidiva akutní plicní embolie při adekvátně vedené antikoagulační terapii (tuto recidivu je nutné objektivně potvrdit),
- Symptomatická extenzivní žilní trombóza při účinně vedené antikoagulační terapii (tuto extenzi je nutné objektivně potvrdit),
- Kontraindikace antikoagulační léčby při vyšší dávce (dočasné nebo trvalé).

Vážné poranění (lebky, páteře), které je lokálním zdrojem difúzních krvácení u pacientů, u kterých nelze aplikovat mechanické prostředky pro preventivní intermitentní kompresi žil a kteří neprodělali plicní embolii nebo u nich nebyla prokázána hluboká žilní trombóza.

Prevence plicní embolie při chirurgických zákrocích se zvýšeným tromboembolickým rizikem u pacientů, kteří v nedávné době prodělali hlubokou žilní trombózu nebo plicní embolii.

Relevantní indikace:

Prevence plicní embolie při chirurgických zákrocích se zvýšeným tromboembolickým rizikem u pacientů, kteří prodělali hlubokou žilní trombózu nebo plicní embolii.

Důležité upozornění: Schválení indikace k preventivnímu zavedení kaválního filtru před chirurgickým zákrokem musí být stanoveno u každého pacienta individuálně a jednotliví účastníci by si měli být vědomi souvisejících rizik. Rozhodnutí musí být schváleno ve spolupráci s veškerými příslušnými odděleními.

Bezpečnost a účinnost zdravotnického prostředku nejsou stanoveny pro uložení v supraplenární pozici nebo v případě těhotenství.

¹ SFICV (Société Française d'Imagerie Cardiaque et Vasculaire). Recommandations et Bonnes Pratiques en Radiologie Vasculaire Interventionnelle. Mars 2007. Pages 93-101.

² SIR (Society of Interventional Radiology). Guidelines for the use of retrievable and convertible vena cava filters: report from the Society of Interventional Radiology multidisciplinary consensus conference. J.A. Kaufman et al, Journal of Vascular Interventional Radiology 2006; 17 (3): 449-59.

³ Guidelines CIRSE 2007 (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe). Quality Improvement guidelines for percutaneous inferior vena cava filter placement for the prevention of pulmonary embolism.

5: Kontraindikace

1. Pacientům, u kterých průměr dolní duté žíly přesahuje **32 mm**, nemůže být implantován kavální filtr ALN OATF s háčkem, protože není možné provést jeho bezpečné upevnění, a tudíž hrozí zvýšené riziko migrace.
2. Přítomnost trombu:
 - v oblasti horní duté žíly,
 - v místě vpichu,
 - v homolaterální v. iliaca,
 - v dolní duté žíle.

Ve všech uvedených případech hrozí riziko, že se tromby během manipulace se zaváděcím systémem posunou a způsobí embolii.

3. Perkutánní zavedení u pacientů vykazujících abnormální koagulační čas.
4. Ve všech případech, kdy je kontraindikována rentgenová kontrola, zejména v případě těhotenství, je nutné pečlivé posouzení výhod a nevýhod umístění filtru.
5. Známa přecitlivělost na některou ze složek představuje kontraindikaci k zavedení kaválního filtru ALN OATF s háčkem (Cf 6. Složení).
6. V případě rizika septické embolie je zavedení kaválního filtru ALN OATF s háčkem kontraindikováno.
7. Uložení kaválního filtru ALN OATF s háčkem je kontraindikováno u dětí a dospívajících.

6: Složení

Filtr duté žíly OATF je vyroben z nerezové oceli 316LVM a má následující složení:

- Uhlík (C) $\leq 0,030\%$
- Mangan (Mn) $\leq 2,00\%$
- Křemík (Si) $\leq 0,75\%$
- Fosfor (P) $\leq 0,025\%$
- Síra (S) $\leq 0,010\%$
- Chrom (Cr): 17,00-19,00%
- Nikl (Ni): 13,00-15,00%
- Molybden (Mo): 2,25-3,00%
- Měď (Cu) $\leq 0,50\%$
- Dusík (N) $\leq 0.10\%$
- Kobalt (Co) $< 0.10\%$
- Fer (Fe): balance

7: Upozornění

Obecná upozornění týkající se používání kaválního filtru ALN OATF s háčkem

1. Pečlivě si přečtěte návod k použití. Tímto návodem je možné se řídit pouze v případě, že jste se rozhodli pro zavedení cestou v. poplitea. Nepoužívejte pro zavádění jinou přístupovou cestou (v. brachialis, v. jugularis nebo v. femoralis).
2. Kavální filtr ALN OATF s háčkem zaváděný cestou v. poplitea je dodáván připravený k použití, je sterilní (sterilizace ethylenoxidem) a nepyrogenní. Produkt nepoužívejte, je-li obal poškozený, otevřený anebo v případě pochybností ohledně jeho sterility.
3. Produkt skladujte na suchém a tmavém místě.
4. Kavální filtr ALN OATF s háčkem nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti uvedeného na štítku.
5. Kavální filtr ALN OATF s háčkem je určen pro jedno použití a z tohoto důvodu není vhodné díly sady opětovně používat nebo sterilizovat.
6. Popliteální zaváděcí systém vždy používejte se zeleným portafiltrem pro přístup cestou v. poplitea.
7. Kavální filtr ALN OATF s háčkem musí být zaveden pouze se zaváděcí sadou, kterou za tímto účelem dodala společnost ALN.
8. Kavální filtr ALN OATF s háčkem musí být odstraněn některou ze sad pro extrakci nebo přemístění, které za tímto účelem prodává společnost ALN. Odstranění lze také provést pomocí lasa s vhodnou velikostí pro odstranění kaválních filtrů (viz kapitola „Vyjmutí“).

Obecná upozornění týkající se postupu

9. Společnost ALN doporučuje, aby úroveň odborných znalostí operátorů lékařů a členů nelékařského personálu, kteří budou výkony provádět, byla v souladu s doporučeními společnosti **SFICV**⁴. To znamená, že pro správné zavedení filtru ALN musí mít zkušenosti alespoň s trvalým filtrem, odstranitelným filtrem nebo dočasným filtrem.

Doporučení společnosti **SFICV:**

- Aby operátor junior mohl být považován za způsobilého k provádění daného výkonu, musí provést 6 zavedení jakožto asistent a 6 zavedení samostatně pod vedením operátora seniora.
 - Aby operátor senior zavedl alespoň 6 filtrů ročně pro udržení své odbornosti.
 - Aby měl radiologický asistent základní úroveň proškolení v oblasti vaskulárních procedur a aby zdravotní sestry a ošetřovatelé včetně těch, kteří jsou přítomni na operačním sále, absolvovali zvláštní odbornou přípravu týkající se invazivního a intervenčního vaskulárního zobrazování.
10. Společnost ALN varuje uživatele před zvýšeným rizikem migrace v těchto případech:
 - Těžké chirurgické operace (hrudník, břišní dutina...),
 - Procedury, které mohou změnit vaskulární hemodynamiku,

⁴ SFICV (Société Française d'Imagerie Cardiaque et Vasculaire). Recommandations et Bonnes Pratiques en Radiologie Vasculaire Interventionnelle. Mars 2007. Pages 93-101.

- Procedury, které mohou způsobit kontakt s dolní dutou žílou a/nebo místem uložení filtru.
- 11. Před procedurou je nutné díly sady – vodící drát s „J“ zakončením, zaváděcí systém (dilatátor + zaváděcí katétr) – propláchnout sterilním heparinizovaným fyziologickým roztokem nebo podobným isotonickým roztokem.
- 12. Nikdy neposouvajte vodící drát s „J“ zakončením nebo zaváděcí systém bez rentgenové kontroly.

Obecná upozornění týkající se kavografie

- 13. V případě předoperačního preventivního zavedení filtru důrazně doporučujeme provést kontrolu filtru snímkovou dokumentací před i po operaci. Tato snímková dokumentace je archivována a založena do zdravotní dokumentace pacienta, aby bylo možné do ní kdykoliv nahlédnout.
- 14. Ujistěte se, že provedení kavografie nepředstavuje pro pacienta žádné riziko: důkladně zohledněte problémy související s použitím kontrastních látek (alergie, selhání ledvin).
- 15. Neroztahujte filtr, pokud nebyl předtím změřen průměr. Měření průměru dolní duté žíly se provádí pomocí kavografie v přední a boční projekci. Je však důležité poznamenat, že kavografie může skutečný průměr dolní duté žíly nadhodnotit nebo podcenit. V případě podezření na širokou dolní dutou žílu (megacava) důrazně doporučujeme změřit průměr dolní duté žíly pomocí echografie nebo skeneru.⁵

Obecná upozornění týkající se roztažení kaválního filtru ALN OATF s háčkem

- 16. Dávejte pozor, aby se kavální filtr ALN OATF s háčkem neroztáhl v trombu, který by mohl zabránit úplnému rozevření filtru a optimálnímu upevnění v dolní duté žíle.

Jiná upozornění

- 17. Jakákoli manipulace s kaválním filtrem ALN pomocí jiného komponent nebo zařízení, než je příslušenství dodávané pro tento účel, je v plné odpovědnosti lékaře.
- 18. Nesprávná manipulace s filtrem duté žíly ALN může také vystavit osobu riziku propíchnutí/poranění nebo infekce, pokud byl filtr explantován.
- 19. Jakýkoli kontaminovaný nebo potenciálně kontaminovaný výrobek může představovat infekční riziko a musí být zlikvidován vhodným způsobem v souladu se standardní lékařskou praxí a platnými předpisy.

⁵ Value of frontal caval measurement in the placement of inferior vena cava filters. Deepak R. Kaura et al, Canadian Association of Radiologists Journal 1999; 5: 301-305.

8: Komplikace

Existují určité potenciální komplikace související se zaváděním filtrů do duté žíly. Proto zavádění nesmí provádět lékaři, kteří s těmito komplikacemi nejsou obeznámeni.

Tyto komplikace se mohou vyskytnout v průběhu zaváděcí procedury a/nebo po ní.

Možné klinické komplikace zahrnují (mimo jiné):

1. nesprávné umístění filtru,
2. neúplné roztažení filtru,
3. vybočení filtru,
4. hematom nebo krvácení v místě vpichu,
5. infekci v přístupové cestě,
6. migraci filtru,
7. okluzi duté žíly,
8. perforaci duté žíly, cév nebo okolního orgánu / struktura,
9. Hematom/krvácení do orgánu/struktury,
10. úmrtí související s migrací trombu směrem k srdci a plicím,
11. trombózu v místě vpichu,
12. trombózu v místě uložení,
13. zlomení nějakého dílu filtru,
14. recidivu plicní embolie,
15. pozdní hlubokou žilní trombózu,
16. arytmií,
17. kontakt hlavy filtru se stěnou duté žíly,
18. hemotorax,
19. edém,
20. pneumotorax,
21. ulceraci,
22. edém dolních končetin,
23. stenózu duté žíly,
24. poškození stěny duté žíly,
25. Arteriovenózní píštěl,
26. Konsumpční koagulopatie.

Známé (ale vzácné) technické komplikace způsobené zařízením, se kterými se uživatelé mohou setkat, zahrnují:

Problém	Příčina	Prevence	Řešení
Při posouvání filtru v zaváděcím katétru se jedna nebo více nožiček ohne v držáku filtru.	Filtr byl posouván pomocí pístu příliš velkou silou.	Filtr pomalu a opatrně posouvejte, aby optimálně prošel kuzelem držáku filtru.	Nechte zaváděcí systém na místě a použijte nový filtr. Společnost ALN doporučuje mít k dispozici minimálně dvě zaváděcí sady.
Nemožnost zavedení filtru do zaváděcího katétru, filtr vyosený z pístu a zablokováný v držáku filtru.	Když byl filtr zatlačen do zaváděcího katétru, píst se uvolnil.	Zatlačte na filtr bez uvolnění pístu tak, aby prošel za nejlepších podmínek v kuželu držáku filtru.	Nechte zaváděcí systém na místě a použijte nový filtr. Společnost ALN doporučuje mít k dispozici minimálně dvě zaváděcí sady.
Filtr nelze zasunout do zaváděcího katétru, deformace filtru.	Dilatátor nebyl vyjmut.	Před posouváním filtru je nutné, aby dilatátor a vodící drát s „J“ zakončením byly vyjmuty.	Vyjměte poškozený filtr a adaptér a zkontrolujte, zda není poškozen zaváděcí katétr. Případně použijte jiný filtr. Pokud zaváděcí systém již není vyhovující, proceduru opakujte. Společnost ALN doporučuje mít k dispozici minimálně dvě zaváděcí sady.
Nožička filtru propíchla zaváděcí katétr při posouvání filtru pomocí tlačného katétru.	Zauzlení zaváděcího katétru při proceduře.	Dávejte pozor, aby bylo se zaváděcím katétre po vyjmutí dilatátoru manipulováno za patiči a nebyl ohnutý.	Celý zaváděcí systém vyjměte a použijte novou zaváděcí sadu. Společnost ALN doporučuje mít k dispozici minimálně dvě zaváděcí sady.


9: Postup zavedení

1: Příprava pacienta

Proveďte dezinfekci a umístěte sterilní krycí roušky. (1) (2)



(1)

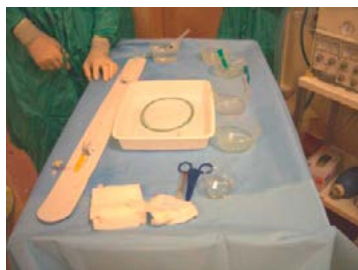

(2)

2: Anestezie a punkce

Proveďte lokální anestezii a poté punkci v. poplitea pomocí dodané jehly 18G. (3)



(3)

3: Zavedení vodícího drátu s „J“ zakončením a proplach zaváděcího systému

Upozornění: Vodicí drát s „J“ zakončením může používat pouze lékař proškolený v technikách srdeční katetrizace. Nikdy neposouvajte vodicí drát s „J“ zakončením nebo zaváděcí systém bez rentgenové kontroly.

Opláchněte vodicí drát s „J“ zakončením sterilním heparinizovaným fyziologickým roztokem nebo podobným isotonickým roztokem a upevněte stříkačku v úrovni patice Luer rozváděče vodicího drátu s „J“ zakončením (4). Pomocí vyrovnávače zakřivení (výztuže) zasuňte ohebný konec vodicího drátu s „J“ zakončením do punkční jehly. (5)



(4)



(5)

Posouvajte vodící drát s „J“ zakončením přes punkční jehlu. Umístěte konec vodícího drátu s „J“ zakončením:

Dolní přístup: infrarenálně.

Nechte určitou délku vodícího drátu s „J“ zakončením odkrytou.

Držte vodící drát s „J“ zakončením na místě a vytáhněte punkční jehlu a výztuž vodícího drátu. (6)



(6)

Upozornění: Při posouvání vodícího drátu s „J“ zakončením zajistěte, aby na něm nebyl ohyb nebo smyčka, a sledujte jeho postup pod kontrolou lékařské zobrazovací techniky. Vodící drát s „J“ zakončením vždy posouvajte dále, než je místo uložení filtru, a dávejte pozor, aby vodící drát vždy přesahoval o 2 nebo 3 cm proximální okraj zaváděcího systému.

Upozornění: V případě odporu se nesnažte vodící drát s „J“ zakončením posouvat nebo ho vytahovat. Zjistěte příčinu odporu pod rentgenem. Pokud příčinu odporu nelze zjistit, vyjměte vodící drát s „J“ zakončením a zaváděcí systém.


Pro snazší zasouvání zaváděcího systému doporučujeme provést dostatečnou incizi tkání kolem vodícího drátu s „J“ zakončením.

Propláchněte zaváděcí systém sterilním heparinizovaným fyziologickým roztokem nebo podobným isotonickým roztokem.

4: Posouvání zaváděcího systému (zaváděcí katétr + dilatátor) a kavografie

Zasuňte proximální část vodícího drátu s „J“ zakončením do distálního konce zaváděcího systému.


Zasouvejte zaváděcí systém do žíly posouváním po vodícím drátu s „J“ zakončením. (7)

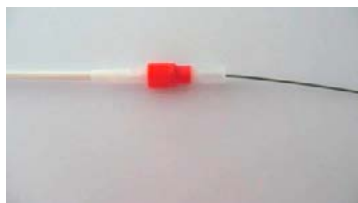

(7)


Zasuňte distální konec zaváděcího systému minimálně do úrovně vv. renales.

Vyjměte vodící drát s „J“ zakončením. (8)

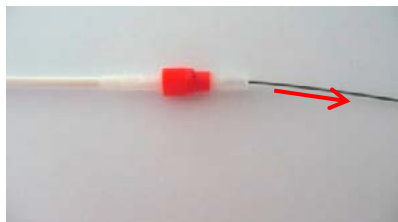

(8)

Vyjměte dilatátor otočením červeného konektoru Luer Lock proti směru hodinových ručiček. (9)

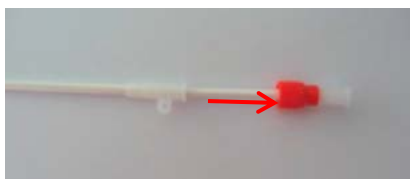

(9)

Pozor: Vodicí drát s „J“ zakončením a dilatátor je nutné vyjmout před provedením kontrolní kavografie, aby se zabránilo jakémukoliv traumatu duté žíly.

Zaváděcí systém opatrně zasuňte o několik centimetrů a proveďte kavografii pro zobrazení vv. renales.

Během provádění veškerých uvedených kroků pozorně sledujte proceduru pomocí lékařské zobrazovací techniky.

Upozornění: Před zaváděním kaválního filtru ALN OATF s háčkem je bezpodmínečně nutné provést kavografii s přední a boční projekcí. Toto vyšetření musí umožnit:

- ověření permeability a definování anatomie dolní duté žíly, homolaterálních v. iliaca a v. renalis,
- změření délky a průměru subrenální dolní duté žíly, zjištění případných anatomických změn dolní duté žíly (dvojitá dutá žíla, levá dolní dutá žíla, vrozené nevyvinutí...),
- diagnostikování patologie dolní duté žíly (částečná nebo úplná trombóza duté žíly, extrinsická komprese související s adenopatií, nádorový syndrom nebo aneurysma aorty),
- určení nejvhodnějšího místa uložení filtru. U dolní duté žíly nevykazující anatomické anomálie: hlava kaválního filtru ALN OATF s háčkem musí být umístěna pod nejspodnější v. renalis.

Upozornění: V případě pochybností o morfologii nebo velikosti duté žíly je nutné provést nové snímkování z různých úhlů.

Upozornění: Neroztahujte filtr, pokud nebyl předtím změřen průměr.

Upozornění: Pacientům, u kterých průměr dolní duté žíly přesahuje 32 mm, nemůže být implantován kavální filtr ALN OATF, protože není možné provést jeho bezpečné upevnění, a tudíž hrozí zvýšené riziko migrace.

5: Proplach zaváděcího katétru

Propláchněte zaváděcí katétr sterilním heparinizovaným fyziologickým roztokem nebo podobným isotonickým roztokem. (10)




Upozornění: Nedostatečný proplach katétru může způsobit vznik sraženiny v zaváděcím systému a špatné upevnění filtru, čímž se zvýší riziko migrace při zavádění. V případě, že by procedura zavádění trvala déle, než se předpokládalo, pravidelně zaváděcí katétr proplachujte.

6: Zavedení filtru do zaváděcího katétru

Upozornění: Zajistěte, aby vodící drát s „J“ zakončením a dilatátor byly vyjmuty před vložením filtru do zaváděcího katétru.

Uchopte držák filtru. Sejměte ochrannou zátku a přiložte v ose držák filtru k zaváděcímu katétru. (11) (12)

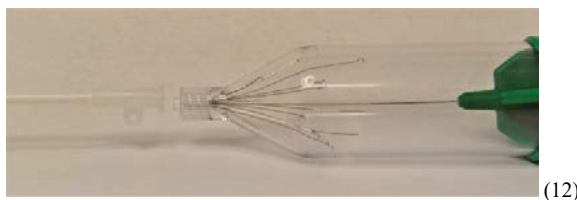

Upozornění: Filtr je umístěn v držáku filtru společnosti ALN a je připraven k použití. Nikdy nepoužívejte filtr, který byl z držáku filtru vyjmut, ani ho do držáku znovu neumíst'ujte. Filtr se nepokoušejte žádným způsobem upravovat. Zejména nezvětšujte ani nezmenšujte jeho průměr ani neupravujte nasměrování filtru v držáku.

Zasuňte konec držáku filtru do patice zaváděcího katétru. Zašroubujte držák filtru (otočením ve směru hodinových ručiček) na patici zaváděcího katétru. (13)



Upozornění: Na držák filtru nepůsobte silou a na zaváděcí katétr ho příliš nedotahujte.

Upozornění: Aby se při posouvání filtru zabránilo perforaci zaváděcího katétru, zajistěte, aby bylo se zaváděcím katétre manipulováno za patici a nebyl ohnutý.

Filtr pomalu a opatrně tlačte pomocí pistu až nadoraz, aby optimálně prošel kuzelem držáku filtru. Tímto způsobem umístíte filtr v zaváděcím katéttru. (14)



(14)

Upozornění: Pokud dojde k deformaci jedné nebo více nožiček filtru v držáku filtru, nepokračujte a použijte jiný filtr.

Vyjmete prázdný držák filtru odšroubováním proti směru hodinových ručiček (15).



(15)

7: Posouvání filtru až na místo uložení


Pod kontrolou lékařské zobrazovací techniky posuňte filtr dolů pomocí tlačného katétru. Černá značka na tlačném katéttru musí být v úrovni patice zaváděcího katétru. (16)



(16)

Upozornění: Nastanou-li potíže při posouvání filtru v zaváděcím katéttru, doporučujeme v případě výrazného odporu nepokračovat a opakuje postup s druhou sadou zaváděče.

Potvrďte nejvhodnější pozici filtru v dolní duté žíle. U dolní duté žíly nevykazující anatomické anomálie: hlava filtru musí být umístěna pod nejspodnější v. renalis. Umístěte rentgenkontrastní kroužek zaváděcího katétru pod nejspodnější v. renalis (viz obrázek 1).

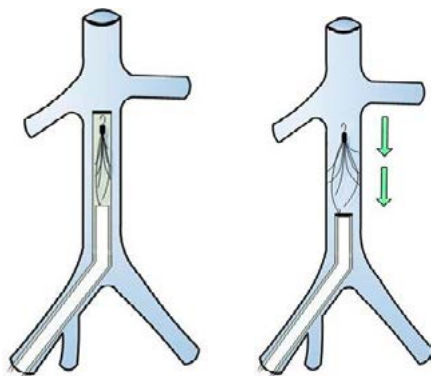

Obrázek 1: Uložení kaválního filtru ALN OATF s háčkem pod nejspodnější v. renalis po zavedení cestou v. poplitea.

Upozornění: Neuvolňujte filtr, dokud není jeho pozice optimální, nejvhodnější místo uložení filtru potvrdí kavografie.

8: Uvolnění filtru v místě uložení

Upozornění: Neroztahujte filtr, pokud nebyl předtím změřen průměr. Pacientům, u kterých průměr dolní duté žíly přesahuje 32 mm, nemůže být implantován kavální filtr ALN OATF, protože není možné provést jeho bezpečné upevnění, a tudíž hrozí zvýšené riziko migrace.

Vytahujte zaváděcí katétr po tlačném katétru pomalu zpět bez trhavých pohybů směrem nahoru, dokud se filtr neuvolní. (17) (18)



(17)



(18)

Upozornění: Jakmile se patice zaváděcího katétru dostane do úrovně černé značky tlačného katétru, důkladně roztáhněte filtr pevným držením patice tlačného katétru a pomalým a plynulým vytahováním zaváděcího katétru zpět po tlačném katétru. Tak dosáhnete optimálního uložení filtru.

Upozornění: Jakmile jsou háčky zasunuté ve stěnách cévy, nepokoušejte se filtr vyjmout nebo ho přemístit jinak než s použitím sady pro extrakci nebo pro přemístění od společnosti ALN určené k tomuto účelu nebo pomocí lasa s velikostí vhodnou pro odstranění kaválního filtru určeného k tomuto účelu. Špičaté háčky by mohly vážně poškodit tkáň.

Upozornění: Pokud je filtr umístěn takovým způsobem, že neposkytuje ochranu před plicní embolií, je nutné ho přemístit nebo umístit další filtr. Vzhledem k tomu, že nesprávně umístěný filtr by mohl mít nepříznivé účinky na kardiorepirační funkce, doporučujeme ho vyjmout chirurgicky nebo pomocí sady pro extrakci nebo pro přemístění od společnosti ALN nebo pomocí lasa s velikostí vhodnou pro odstranění kaválních filtrů určených k tomuto účelu.

9: Ukončení procedury

Vyjměte tlačný katétr a proveďte postoperační kontrolní kavografii s odečtenými a neodečtenými snímky (přední a boční projekce). Snímky je nutné archivovat, musí být dostupné na filmovém nebo elektronickém nosiči dat a založené do zdravotní dokumentace pacienta.

Vyjměte zaváděcí katétr.

Zajistěte zástavu krvácení v místě vpichu.

Upozornění: *Použité díly sady je nutné zlikvidovat v souladu s obvyklými postupy v lékařské praxi a v souladu s platnými právními předpisy.*

24 hodin po uložení filtru je nutné provést rentgenový snímek dutiny břišní (bez přípravy).

Tento referenční dokument týkající se stability, celistvosti a uložení filtru musí být k dispozici pro případnou pozdější konzultaci (jako součást zdravotní dokumentace pacienta).

10: Sledování pacienta

S ohledem na výše uvedená rizika doporučujeme u pacienta sledovat tyto body:

- Prohlédněte zaváděcí vpich katétru, abyste se ujistili o řádném zahojení.
- Před propuštěním pacienta a následně každý další rok je nutné provést rentgenový snímek dutiny břišní bez přípravy s přední a boční projekcí.
- V prvním měsíci musí být pacientovi poskytnuta navazující konzultace s praktik, který filtr zavedl, nebo s jeho týmem a případně s klinickým lékařem, který ho na zákrok odeslal.
- Pisemný dokument upřesňující:
 - ✓ typ filtru, číslo šarže a sériové číslo,
 - ✓ datum zavedení filtru,
 - ✓ zařízení a oddělení, na kterém byl filtr zaveden,

musí být předán pacientovi a jeho ošetřujícímu lékaři. Pacient a ošetřující lékař musí být informováni o nutném sledování a případných komplikacích.

Pacientovi musí být předána implantační karta společnosti ALN určená k tomuto účelu.

- Při sebemenším podezření na rekurentní plicní embolii nebo na zánět žil je nutné provést kontrolu permeability zobrazovací technikou.

Souhrn bezpečnostních a funkčních charakteristik bude k dispozici v Evropské databázi zdravotnických prostředků (EUDAMED) prostřednictvím tohoto odkazu: [SS\(C\)P > SS\(C\)P: DOC-225 - EUDAMED](https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home).

Veřejné internetové stránky společnosti Eudamed jsou: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home>

Elektronická kopie tohoto návodu k použití je k dispozici na webových stránkách společnosti ALN: www.aln2b.com.

11: MRI

Neklinický test provedený dle normy ASTM F2052 prokázal, že kavální filtr ALN OATF s háčkem je „MR-podmíněný“. Pacient, kterému byl zaveden tento filtr, může bez rizika podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí za těchto podmínek po implantaci:

- statické magnetické pole o síle 3 T nebo méně,
- prostorový gradient magnetického pole 600 Gauss/cm nebo méně,
- hodnota SAR maximálně 2 W/kg na 15minutové vyšetření.

V průběhu neklinického testu byl u kaválního filtru ALN OATF s háčkem zaznamenán nárůst teploty o 2,3°C při hodnotě SAR 2 W/kg během 15 minut na MRI o síle magnetického pole 3 T.

Kvalita snímků pořízených MRI může být zhoršena, pokud se zájmová oblast vyšetření nachází přímo v místě nebo v blízkosti implantovaného kaválního filtru. V takovém případě může být nutné optimalizovat parametry přístroje pro lepší zobrazení. Při provádění vyšetření u pacienta se zavedeným kaválním filtrem OATF s háčkem je vždy nutné nahlížet do uživatelské příručky k přístroji MRI.

12: Vyjmutí

Pokud již nehrozí riziko embolie nebo pominou důvody indikace k zavedení filtru, může být kavální filtr ALN OATF s háčkem kdykoliv vyjmut pomocí **sady pro extrakci nebo přemístění** od společnosti ALN určené k tomuto účelu nebo pomocí lasa s velikostí vhodnou pro odstranění kaválních filtrů.

Laso pro odstranění kaválního filtru ALN s háčkem musí mít maximální průměr drátu 0,6 mm. Vyjímací katétr používaný s lasem musí mít minimální vnitřní průměr 9F.

Postup vyjmutí je popsán v návodu k použití sady pro extrakci nebo pro přemístění kaválního filtru ALN.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat s kaválním filtrem OATF s háčkem pomocí jiného příslušenství, než je příslušenství určené k tomuto účelu, a to na plnou odpovědnost lékaře.

Pro vyjmutí kaválního filtru ALN OATF s háčkem pomocí lasa je nutné pomocí lékařské zobrazovací techniky ověřit, zda:

- filtr nevykazuje velké vybočení, což by ztížilo, dokonce znemožnilo, vyjmutí pomocí lasa,
- se háček nedotýká cévní stěny,
- se ve filtru, v dolní duté žíle nebo v hlubokých žilách nenachází žádný trombus.

Pokud je filtr příliš vybočen, háček se dotýká cévní stěny nebo je ve filtru, v dolní duté žíle nebo v hlubokých žilách přítomen trombus, je lepší filtr nevyjímat.

Příprava lasa se musí provádět podle doporučení výrobce. Dále:

- Umístěte laso nad háček kaválního filtru ALN OATF s háčkem. Zkontrolujte, zda se katétr snadno posouvá po lasu.
- Zcela otevřete kličku lasa a opatrně ji vtáhněte do háčku kaválního filtru ALN OATF s háčkem.
- Opatrně vtahujte laso do katétru, aby se uzavřelo kolem háčku. Dále opatrně vtahujte katétr, dokud se filtr zcela nezatáhne dovnitř. Nikdy lasem netahejte za háček.
- Laso, katétr a filtr vyjměte zároveň.

Kavální filtr ALN OATF s háčkem může být také zaveden trvale. Rozhodnutí o vyjmutí musí být učiněno individuálně u každého pacienta v závislosti na jeho klinickém stavu.

13: Obal a manipulace

Kavální filtr ALN OATF s háčkem je dodáván připravený k použití, je sterilní (sterilizace ethylenoxidem) a nepyrogenní.

Produkt nepoužívejte, je-li obal poškozený, otevřený anebo v případě pochybností ohledně jeho sterility.

Při manipulaci s tímto produktem postupujte asepticky.

Produkt skladujte na suchém a tmném místě.

Kavální filtr ALN OATF s háčkem nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti uvedeného na štítku.

Kavální filtr ALN OATF s háčkem je určen pro jedno použití a z tohoto důvodu není vhodné díly sady opětovně používat nebo sterilizovat.

14: Likvidace zařízení

Použité zařízení se stává infekčním rizikovým zdravotnickým odpadem. Musí projít dekontaminací a zlikvidovat příslušným kanálem (příklad: spálením nebo předúpravou dezinfekcí) v souladu s obvyklou lékařskou praxí a podle platných předpisů.

Nepoužitý prostředek musí být zlikvidován následovně: jehla musí být zlikvidována spolu s odpadem ze zdravotnických činností s rizikem infekce, pokud byla vyjmuta z obalu, protože se může vystavit nebezpečí poranění. Kartonovou krabici a papírové pokyny je třeba recyklovat. Zbytek zařízení lze zlikvidovat prostřednictvím běžného odpadu ze zdravotnických zařízení.

15: Záruka

Společnost ALN prohlašuje, že tento produkt vyrobila s veškerou náležitou péčí. Tato záruka nahrazuje a vylučuje jakékoliv jiné výslovné nebo implicitní záruky poskytnuté na základě jakéhokoliv ustanovení, které v ní není výslovně uvedeno, zejména veškeré implicitní záruky týkající se vhodnosti výrobku pro uvedení na trh a pro jeho zvláštní použití s ohledem na skutečnost, že manipulace, skladování, opakované čištění a nevhodná opakovaná sterilizace tohoto výrobku a také některé faktory týkající se pacienta, diagnostiky, léčby, chirurgických postupů atd., které jsou nezávislé na kontrole společnosti ALN, mají vliv na tento produkt a na výsledky, které umožňuje dosáhnout.

Společnost ALN nenese odpovědnost za žádnou nahodilou nebo nepřímou škodu ani za ztráty nebo náklady vyplývající přímo či nepřímo z používání tohoto výrobku.

Některé země nepovolují vyloučení implicitních záruk ani dodatečných nebo nepřímých škod. Můžete využít jiných právních úkonů v souladu s právními předpisy ve vaší zemi.

Společnost ALN navíc nemá žádný další závazek nebo dodatečnou odpovědnost ve vztahu k tomuto výrobku a k přijetí takového závazku či odpovědnosti neopravňuje žádnou třetí stranu.

16: Povinnost hlásit události nebo rizika událostí

Upozornění pro uživatele a/nebo pacienta: jakákoli závažná událost, ke které dojde v souvislosti s prostředkem, musí být hlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.



ALN S.A.R.L.
589, chemin du Niel
83230 Bormes les Mimosas
France

Tel.: +33 (0)4 94 01 05 01

Webové stránky: <http://www.aln2b.com>

E-mailová adresa: contact@aln2b.com