


Fiche Technique Kits d'extraction et/ou repositionnement ALN Droit & Angulé

- Uniquement par voie jugulaire
- Système de pince : spécialement conçu pour le retrait de tous les filtres veine cave ALN
- Marquage CE 0297- Classe III
- Approbation FDA

Les Kits d'extraction et/ou repositionnement ALN STRAIGHT RS et ALN PRE-CURVED RS contiennent :

- ✓ Un **Cathéter Pince** (Cathéter 7F avec deux marquages noirs + Pince avec 8 brins + Robinet de rinçage 3 voies)
- ✓ Un **Système d'Introduction** (dilatateur, cathéter 9F avec un marqueur radio-opaque)
- ✓ Une **Aiguille de ponction**
- ✓ Un **Guide en J**

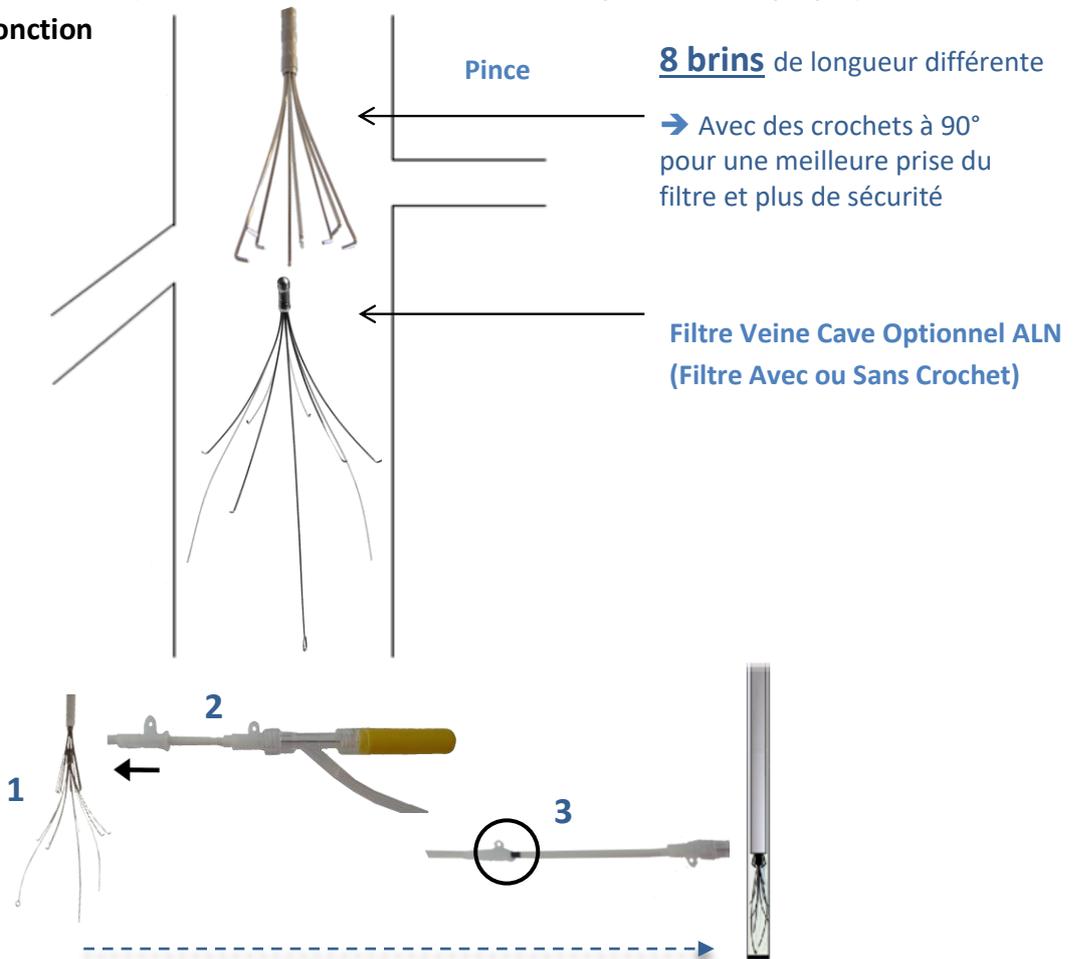




Caractéristiques du système de retrait

Diamètre des brins (mm)	Matériau	Diamètre de la pince (mm)	Longueur de la pince (mm)
0,4	Acier inoxydable 316 LVM*	13.5-15	24 

*ISO 5832-1

Kit d'extraction et/ou de repositionnement Droit du Filtre Veine Cave Optionnel ALN

ALN STRAIGHT RS

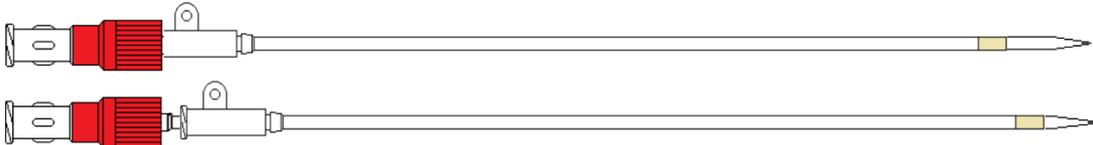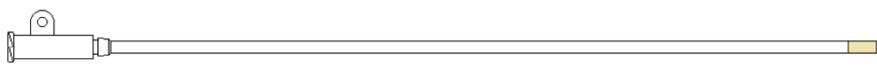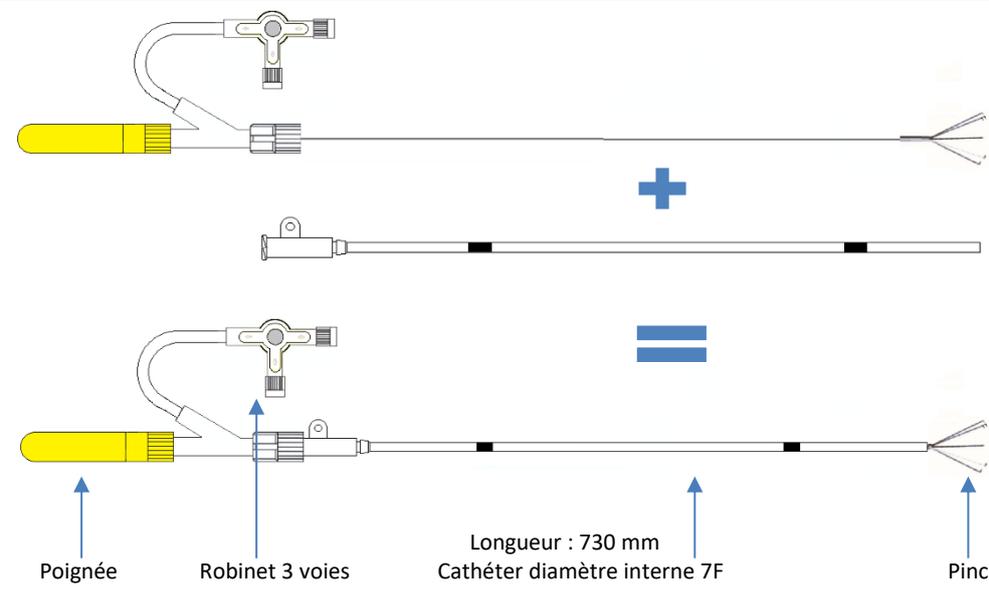Voie d'abord	Jugulaire		
Référence	FT.902010		
Système d'introduction : Dilatateur dans la gaine d'extraction			
			
Gaine d'Extraction	 Marqueur radio-opaque Pas de valve hémostatique	Ø Interne: 9F Ø Externe: 11F	Longueur : 570 mm
Dilatateur		Ø Interne: 3F Ø Externe: 9F	Longueur : 630 mm
Cathéter	 2 marqueurs noirs pour visualiser les étapes de la procédure du retrait	Ø Interne: 7F Ø Externe: 9F	Longueur : 596 mm
Kit pince	 <p style="text-align: center;"> Poignée Robinet 3 voies Longueur : 730 mm Cathéter diamètre interne 7F Pince </p>		
Aiguille de ponction		Ø : 18G	
Guide en J	Ø : 0,035 " J Radius (mm) :3 Longueur : 150cm		

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Kit d'extraction et/ou de repositionnement Angulé du Filtre Veine Cave Optionnel ALN

ALN PRE-CURVED RS

Voie d'abord

Jugulaire

Référence

FT.902010/VS2

Système d'introduction : Dilatateur dans la gaine d'extraction



Gaine d'Extraction



Marqueur radio-opaque
Pas de valve hémostatique

Ø Interne: **9F**
Ø Externe: **11F**

Longueur : 570 mm


Dilatateur



Ø Interne: **3F**
Ø Externe: **9F**

Longueur : 630 mm


Cathéter

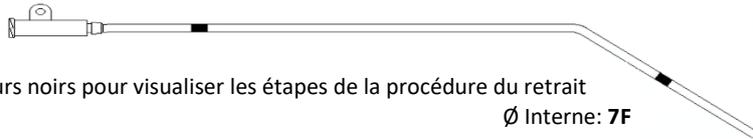

2 marqueurs noirs pour visualiser les étapes de la procédure du retrait
Ø Interne: **7F**

Longueur : 596 mm

Kit pince

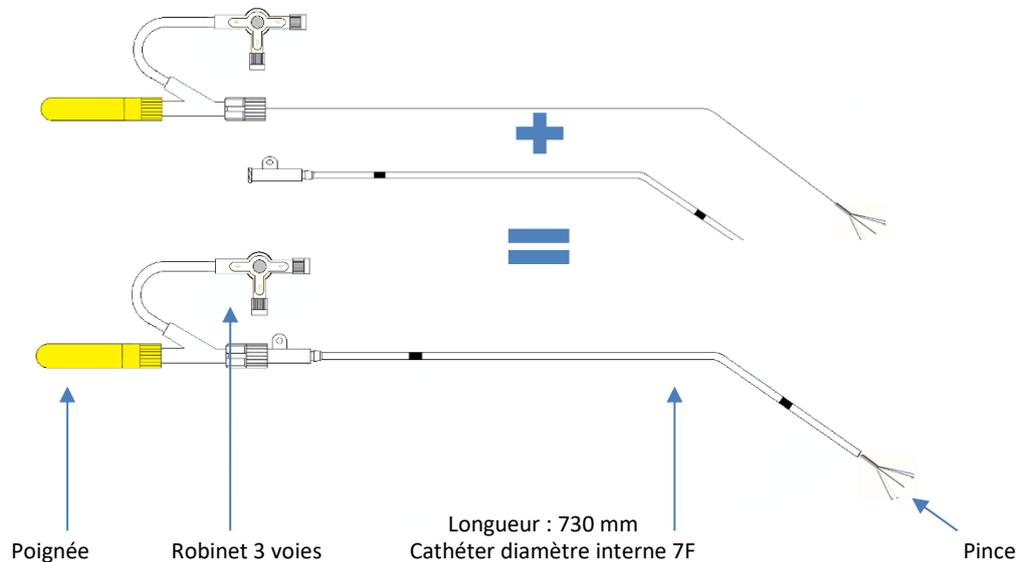

Poignée

Robinet 3 voies

Longueur : 730 mm
Cathéter diamètre interne 7F

Pince

Aiguille de ponction



Ø : **18G**

Guide en J

Ø : **0,035 "**
Radius (mm) :3
Longueur : 150cm



Stérilisation à l'oxyde d'éthylène